


3M BAIR HUGGER 675

DATOS

El calentador de pacientes 3M Bair Hugger Modelo 675 es una unidad compacta y versátil diseñada para su uso en cualquier entorno clínico. Su avanzado sistema de control de temperatura garantiza un calentamiento eficiente y fiable del paciente durante todo el perioperatorio. Con un diseño ergonómico y compatible con las mantas y batas térmicas Bair Hugger, esta unidad es ideal para mantener la normotermia y mejorar la atención al paciente.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuatro ajustes de temperatura:** Incluye temperatura ambiente, baja (32 °C), media (38 °C) y alta (43 °C) para un control térmico preciso.
- **Diseño ergonómico de la manguera:** Simplifica la inserción de la manta y garantiza un ajuste seguro para una circulación óptima del aire.
- **Interfaz intuitiva:** Controles fáciles de usar para ajustes rápidos.
- **Alarmas sonoras y visuales:** alertas por sobret temperatura y baja temperatura para mayor seguridad.
- **Diseño portátil:** Se puede usar sobre una superficie plana, montarlo en un soporte para suero o colocarlo en un carrito con ruedas para mayor comodidad.
- **Indicador de cambio de filtro:** Proporciona recordatorios oportunos para el mantenimiento.
- **Amplia compatibilidad:** Funciona a la perfección con todas las mantas y batas térmicas 3M Bair Hugger, desde tallas pediátricas hasta tallas adultas.

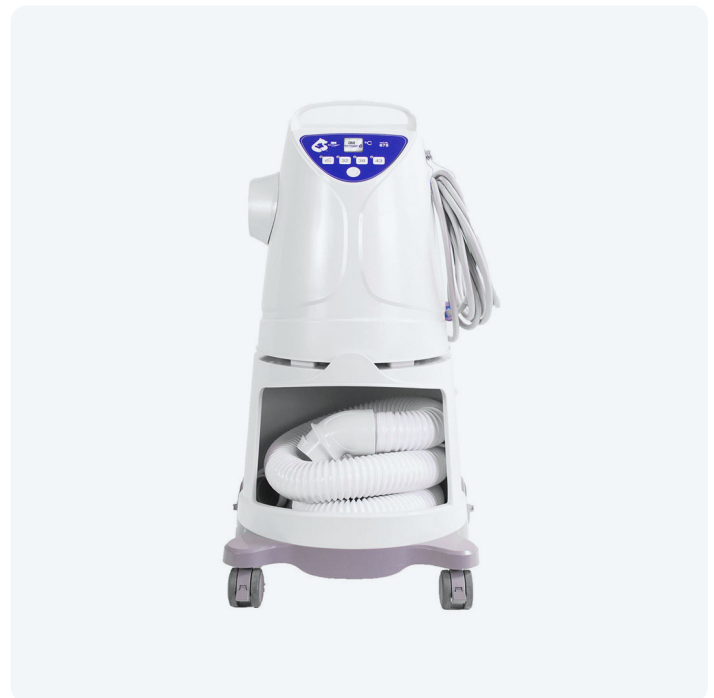

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 36 cm (14,5 pulg.)

Ancho: 27 cm (10,5 pulg.)

Profundidad: 28 cm (11 pulg.)

Peso: 4,5 kg (10 lb)

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

Alta: 43 °C (109,4 °F)

Media: 38 °C (100,4 °F)

Baja: 32 °C (89,6 °F)

Ambiente: Temperatura ambiente

ALIMENTACIÓN: CA

Voltaje: 110–120 V CA

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 11 amperios

FILTRACIÓN

Tipo de filtro: MERV 14

ALARMAS

Alarmas sonoras y visuales para sobretemperatura y baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Manguera: desmontable y de diseño ergonómico para facilitar su uso.

Opciones de montaje: compatible con soportes para suero, carros con ruedas y superficies duras.